

Gebrauchs- und Pflegeanleitung Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort.

Mit dem Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort® haben Sie sich für ein TOGU® Markenprodukt „made in Germany“ entschieden!


Es ist entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert und enthält keine verbotenen Phthalate und keine Schwermetalle.

Bitte lesen sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch um dem Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort eine möglichst lange Lebensdauer zu garantieren.


Be- und Entlüften:

Zum Belüften die Nadel auf die Pumpe aufsetzen, Nadelspitze leicht befeuchten, die Hälfte des Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort, auf der sich das Ventil befindet, knicken und vorsichtig Pumpennadel in das Ventil einführen – pumpen.

Für das entlüften die Hälfte des Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort mit dem Ventil knicken, die leicht befeuchtete Nadelspitze in das Ventil einführen und durch leichtes Zusammendrücken kann die Luft entweichen (Aufschrauben auf die Pumpe hierfür nicht notwendig).

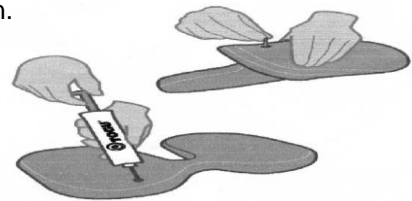


Richtige Füllmenge:

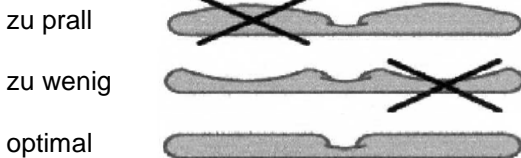

Test für die richtige Füllmenge:


Drücken Sie mit der Hand auf eine Hälfte des Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort. Wenn die andere Hälfte plan bleibt (sich also nicht wölbt oder durch hängt ist die Füllung optimal).

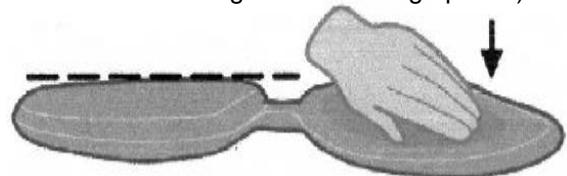

Platzierung:


Stellen Sie die Sitzfläche Ihres Sitzes in eine leicht nach hinten geneigte Stellung.

Legen sie das Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort circa 5 cm von der Lehne entfernt auf die Sitzfläche.

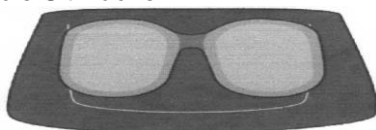

Überprüfen Sie, ob Ihre Knie im Sitzen etwas höher liegen als Ihr Gesäß.

Vermeiden Sie eine nach vorne gekippte Stellung der Sitzfläche (siehe rechte Abb.).

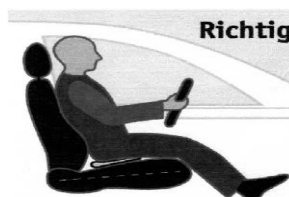



Kleine Gerätekunde:

Das Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort nimmt schon nach wenigen Minuten die Körpertemperatur an. Der Neu-Geruch des Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort verliert sich, wie bei einem neuen Fahrzeug, schon nach kurzer Zeit. Es ist aus hochwertigem Ruton mit Nadelventil hergestellt.

Maße: 40x28 cm

Belastbarkeit: ca. 200 kg

Pflege:

Für die schonende Reinigung des Airgo® Aktiv Sitzkissen / Comfort verwenden Sie einen milden Kunststoff-Reiniger, wie z. B. Öko-Powercleaner. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Pumpe mit dem entsprechenden Nadelaufsatz, um eine Schädigung des Ventils zu vermeiden.

